

Электрокардиограф для ветеринарии

ОБУЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Методическое сопровождение и обучение применению методов функциональной диагностики в ветеринарной медицине организовано на клинической базе ИНСТИТУТА ВЕТЕРИНАРНОЙ БИОЛОГИИ (www.invetbio.spb.ru).

Техническое сопровождение, гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется производителем «Компания Нео».

Гарантийный срок – 2 года.

ОРГАНИЗОВАНЫ КУРСЫ ПО КАРДИОЛОГИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТА, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

- Анатомия
- Физиология
- Расшифровка электрокардиограмм
- Терапия кардиобольных

Комплект поставки

Электрокардиограф ЭКГК-02
с кабелем отведений

Комплект электродов

Гель

Программное обеспечение

Сопроводительная документация



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ



Производитель медицинского оборудования

ООО «КОМПАНИЯ НЕО»

Адрес: ул. Комсомола, дом 41 лит. А, офис 312,
195009, Санкт-Петербург
(812) 335-4407, 335-4408
info@valenta.spb.ru
www.valenta.spb.ru

модель
ЭКГК-02

Разработано с участием ведущих специалистов кафедры физиологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины



Валента®
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электрокардиограф для ветеринарии

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компьютерный кардиограф ЭКГК-02 предназначен для проведения электрокардиографического и кардиоритмографического исследований функционального состояния животных в условиях ветеринарной клиники, экспериментальной лаборатории или по месту содержания.

45000 руб.

Электрокардиограф ЭКГК-02 подключается к стандартному USB-разъему компьютера и позволяет проводить кардиомониторинг в режиме реального времени

Технические характеристики

Отведений, синхронно регистрируемых	4
Размеры	140x60x30 мм.
Вес	180 г.
Частота дискретизации	2000 Гц
Диапазон частот	0,05-150 Гц
Подавление синфазной помехи	100 дБ


В комплект поставки входит:

- ✓ электрокардиограф
- ✓ программное обеспечение
- ✓ комплект электродов
- ✓ гель
- ✓ инструкция по применению

Электрокардиограф для ветеринарии


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение выполняет автоматическую обработку ЭКГ с учетом физиологических особенностей различных животных: кошек, собак, лошадей или грызунов.

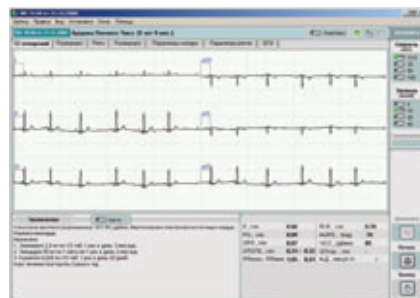

Выбор правил автоматической интерпретации в соответствии с видом и массой исследуемого животного

Коррекция пользователем результатов автоматического распознавания ЭКГ

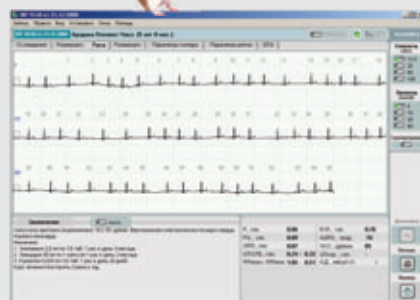

Отображение результатов анализа ритма сердца и контура ЭКГ

Электрокардиограф для ветеринарии

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Варианты комплектации электрокардиографа формируются с учетом назначения комплекса и требований заказчика.

Дополнительно предлагается штатив-стойка для размещения ноутбука и электрокардиографа.



Для работы с домашними животными (собаки, кошки) предлагаются дисковые электроды с резинками



Для работы с грызунами предлагаются электроды на лапы, вмонтированные в специальную подставку. Упрощают проведение скрининга или биологических экспериментов



Для работы с лошадьми предусматривается удлиненный USB-кабель, связывающий электрокардиограф с компьютером

Плоские электроды позволяют выполнить оснащение и исследование с минимальным беспокойством для животного

